



Инновационный скрининговый
тест для раннего выявления
Более 50 видов рака
анализа крови



Galleri сканирует кровь на выявления сигнала, который является общим для десятков видов рака, а также определяет возможный источник сигнала рака.

Революция в сфере скрининговых тестов: Более чем 50 видов рака по анализу крови

Эффективность теста Galleri была широко изучена и подтверждена в

9 клинических исследований, включавших более

380,000 участников

Galleri — единственный в мире и первый в своем роде тест, который:

- Сканирует сигналы, характерные для 50 видов рака, в том числе как для агрессивных, быстрорастущих опухолей, так и для тех, которые не проявляют симптомов на ранних стадиях, как, например, рак поджелудочной железы или яичников¹;
- Ищет сигнал, указывающий на наличие активного рака на момент проведения теста, но не прогнозирует риск развития рака в будущем.

Тест Galleri не выявляет все существующие виды рака, и не все виды рака можно обнаружить с помощью анализа крови. Может иметь ложноположительный или ложноотрицательный результат.

Только для 5 видов рака существуют специальные рекомендуемые скрининговые тесты².

Добавление теста Galleri к плановым ежегодным скрининговым анализам

может повысить шансы обнаружить рак на ранней стадии.

Тест Galleri не заменяет стандартные скрининговые тесты, рекомендованные Министерством здравоохранения и лечащим врачом (например, маммографию для раннего выявления рака молочной железы и анализ кала на скрытую кровь для раннего выявления рака толстой кишки).



Для кого предназначен тест Galleri?

Тест предназначен для людей младше 50 лет с дополнительными факторами риска, такими как историей онкологических заболеваний в семье; с наличием генетической мутации, повышающей риск развития рака; выздоровевших после онкологического заболевания

***Тест Galleri не рекомендуется беременным женщинам, лицам в возрасте 21 года и младше, а также лицам, проходящим активное лечение от рака.**


Возраст является наиболее значимым фактором риска развития рака.



У людей старше 50 лет риск развития рака в 13 раз выше, чем у людей моложе 50 лет³, независимо от наличия онкологических заболеваний в семейном анамнезе.

Как это работает?

ДНК раковых клеток отличается от ДНК здоровых клеток. Тест Galleri выявляет в анализе крови (2 пробирки) **свободную ДНК**, попадающую в кровь из раковых клеток, и, благодаря использованию передовых технологий, способен с высокой точностью определить возможный источник рака.^{1,4}

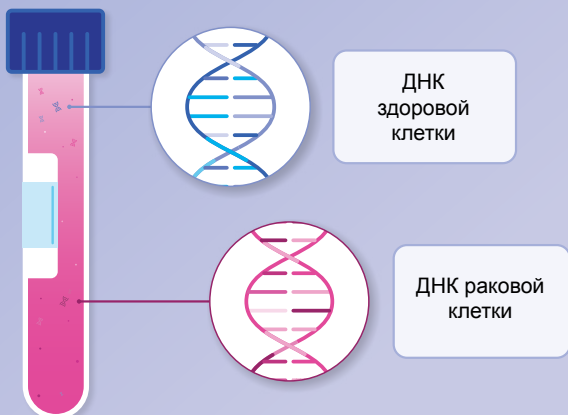

Этапы проведения теста

1

Обратитесь в колл-центр по телефону *2755, чтобы получить разъяснения и заказать тест Galleri.



2

Назначьте анализ крови в одном из пунктов забора крови по всей стране — нет необходимости голодать или проводить специальную подготовку перед анализом. Взятый у Вас образец крови будет отправлен для проведения теста Galleri в лабораторию GRAIL в США.



3

Результат теста будет готов примерно через три недели с момента поступления образца крови в лабораторию GRAIL.



Типы онкологических заболеваний, которые тест Galleri может обнаружить

Крупные клинические исследования показали, что тест Galleri выявляет общий сигнал от 50 видов онкологических заболеваний¹:

- Adrenal Cortical Carcinoma
- Ampulla of Vater
- Anus
- Appendix, Carcinoma
- Bile Ducts, Distal
- Bile Ducts, Intrahepatic
- Bile Ducts, Perihilar
- Bladder, Urinary
- Bone
- Breast
- Cervix
- Colon and Rectum
- Esophagus & Esophagogastric Junction
- Gallbladder
- Gastrointestinal Stromal Tumor
- Gestational Trophoblastic Neoplasms
- Kidney
- Larynx
- Leukemia
- Liver
- Lung
- Lymphoma (Hodgkin and Non-Hodgkin)
- Melanoma of the Skin
- Merkel Cell Carcinoma
- Mesothelioma, Malignant Pleural
- Nasal Cavity & Paranasal Sinuses
- Nasopharynx
- Neuroendocrine Tumors of the Appendix
- Neuroendocrine Tumors of the Colon and Rectum
- Neuroendocrine Tumors of the Pancreas
- Oral Cavity
- Oropharynx (HPV-Mediated, p16+)
- Oropharynx (p16-) & Hypopharynx
- Ovary, Fallopian Tube & Primary Peritoneum
- Pancreas, exocrine
- Penis
- Plasma Cell Myeloma & Plasma Cell Disorders
- Prostate
- Small Intestine
- Soft Tissue Sarcoma of the Abdomen & Thoracic Visceral Organs
- Soft Tissue Sarcoma of the Head & Neck
- Soft Tissue Sarcoma of the Retroperitoneum
- Soft Tissue Sarcoma of the Trunk & Extremities
- Soft Tissue Sarcoma Unusual Histologies & Sites
- Stomach
- Testis
- Ureter, Renal Pelvis
- Uterus, Carcinoma & Carcinosarcoma
- Uterus, Sarcoma
- Vagina
- Vulva

Как интерпретировать результаты теста

Есть два варианта результата теста:

1. сигнал рака не обнаружен
2. обнаружен сигнал рака



Результат «Сигнал рака не обнаружен»

Это означает, что в Вашем образце крови не обнаружено сигналов рака.

- Этот результат не исключает полностью возможное наличие заболевания, поскольку тест Galleri не выявляет все виды рака, и не все виды рака можно обнаружить с помощью анализа крови.
- Приблизительно 99% людей, прошедших тест Galleri, получают результат «сигнал рака не обнаружен»⁴.

Что делать, если получен результат «Сигнал рака не обнаружен»?

Следует продолжать регулярно проводить плановые скрининговые исследования, рекомендованные врачом и Министерством здравоохранения.

Добавление теста Galleri к ежегодной программе скрининга может повысить шансы обнаружить рак на ранней стадии¹.

Проконсультируйтесь с врачом о том, как часто следует проходить тест.



Результат «Обнаружен сигнал рака»

Это означает, что в образце Вашей крови обнаружен сигнал рака. Результат также будет включать предполагаемый источник опухоли, связанный с обнаруженным сигналом, что поможет в дальнейших медицинских проверках, которые нужно будет провести.

Результат «обнаружен сигнал рака» получает только Приблизительно 1 из 100 тестируемых⁴.

Что делать, если получен результат «Обнаружен сигнал рака»?

Galleri — это скрининговый тест, поэтому этот результат не ставит диагноз рака, и требуется дальнейшее обследование с использованием диагностических тестов, которые могут включать лабораторные анализы и рентгеновскую диагностику.

Медицинский менеджер компании Oncotest будет сопровождать Вас в ходе всего процесса диагностики, который будет финансировать компания Oncotest.

Примерно в 60% случаев результата «Обнаружен сигнал рака» обследования завершатся установлением диагноза рака⁴.

Возможен ложноположительный или ложноотрицательный результат.

**для дополнительной информации о тесте
Galleri обращайтесь:**

***2755 | galleri@galleri.co.il | www.oncotest.co.il**

Что еще нужно знать, перед тем как заказать тест?

Ограничения теста

Galleri — это скрининговый тест, предназначенный только для клинического использования. Тест рекомендуется людям, у которых имеется повышенный риск развития рака, например, в возрасте 50 лет и старше. Тест Galleri выявляет сигналы, указывающие на возможность наличия раковых клеток в организме на момент проведения теста, но он не прогнозирует риск развития рака в будущем. Тест не выявляет сигналы, связанные со всеми типами рака, и поэтому его следует использовать в дополнение к стандартным плановым скрининговым/диагностическим тестам для выявления рака, рекомендованным Министерством здравоохранения и лечащим врачом, а не вместо них. Тест Galleri не рекомендуется беременным женщинам, лицам в возрасте 21 года и младше, а также лицам, проходящим активное лечение от рака. Результат, согласно которому «обнаружен сигнал рака», не является диагнозом от. Для диагностирования рака необходимо провести дальнейшие диагностические тесты. Процесс установления диагноза будет сопровождаться медицинским менеджером компании Rhenium Oncotest и будет финансироваться ею же. В случае, когда тест выдаст результат, указывающий на обнаружение сигнала рака, но диагностические тесты не указывают на наличие рака, это может означать, что рака нет, и что был получен ложноположительный результат (коэффициент ложноположительных результатов составляет 0,4%); или рак есть, но проведенные тесты не смогли его обнаружить. Помимо прочего, это связано с тем, что локализация рака отличается от той, к которой направляет тест. Результат «сигнал рака не обнаружен» не исключает наличия рака на момент проведения теста или развития рака в будущем. Тест может дать ложноотрицательный результат, то есть возможна ситуация, при которой в организме присутствуют раковые клетки, но тест выдаст результат, в котором будет указано, что «сигнал рака не обнаружен». Лица, получившие результат, в котором указано, что «сигнал рака не обнаружен», должны продолжать проходить все скрининговые тесты и/или плановые диагностические исследования для выявления онкологических заболеваний, рекомендованные Министерством здравоохранения и лечащим врачом. Интерпретация результатов тестирования основана на имеющихся в настоящее время научных знаниях. Вполне возможно, что в будущем новые научные открытия заменят или расширят информацию, используемую для интерпретации результатов тестов. Важно отметить, что компания GRAIL не проводит повторный анализ результатов тестирования и не составляет новые отчеты об анализах, и ни она, ни Rhenium Oncotest не обязаны этого делать.

О лаборатории

Министерство здравоохранения Израиля разрешило проведение теста Galleri в клинической лаборатории GRAIL. Лаборатория сертифицирована в соответствии с американским стандартом CLIA (Поправки к Закону об улучшении работы клинических лабораторий) и CAP (Коллегия американских патологов) для проведения исследований высокой сложности. Тест Galleri предназначен для клинического использования, но не одобрен Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA). Эффективность теста была определена лабораторией GRAIL, разработчиком теста. Компания Rhenium Oncotest, продающая Тест Galleri, предлагает широкий спектр современных исследований. Уже около двух десятилетий компания Rhenium Oncotest предлагает комплексный и всесторонний подход к диагностике рака, сотрудничая с ведущими лабораториями по всему миру, чтобы врачи имели возможность подбирать наиболее подходящее лечение для своих пациентов.

Источники информации:

1. Klein EA, Richards D, Cohn A, et al. Clinical validation of a targeted methylation-based multi-cancer early detection test using an independent validation set. Ann Oncol. 2021;32(9):1167-77. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.annonc.2021.05.806>.
2. בדיקות סקר לגילוי מוקדם של מחלות הסרטן, מרכז המחקר והמידע, הכנסת 20 פברואר, 2023.
3. Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) Program (seer.cancer.gov) SEER*Stat Database Incidence – SEER Research Limited-Field Data, 21 Registries, Nov 2020 Sub (2000-2018) – Linked To County Attributes -Time Dependent (1990-2018) Income/Rurality, 1969-2019 Counties, National Cancer Institute, DCCPS, Surveillance Research Program, released April 2021, based on the November 2020 submission. Risk Factor Data on file: American Cancer Society Cancer Prevention Studies II/III.
4. Schrag D, Beer TM, McDonnell CH, et al. Blood-based tests for multi-cancer early detection (PATHFINDER): a prospective cohort study. Lancet.2023;402:1251-1260. doi: 10.1016/S0140-6736(23)01700-2
5. Nabavizadeh N, et al. Proffered Presentation presented at: European Society for Medical Oncology (ESMO) Congress; October 17-21, 2025; Berlin, Germany

**С дополнительными вопросами
обращайтесь:**

***2755 | galleri@galleri.co.il | www.oncotest.co.il**



ONCOTEST

Galleri is a trademark of GRAIL, Inc.

IL-GA-2100012-E8-RUS